


Hill-Rom.

## Travma Sedyesi

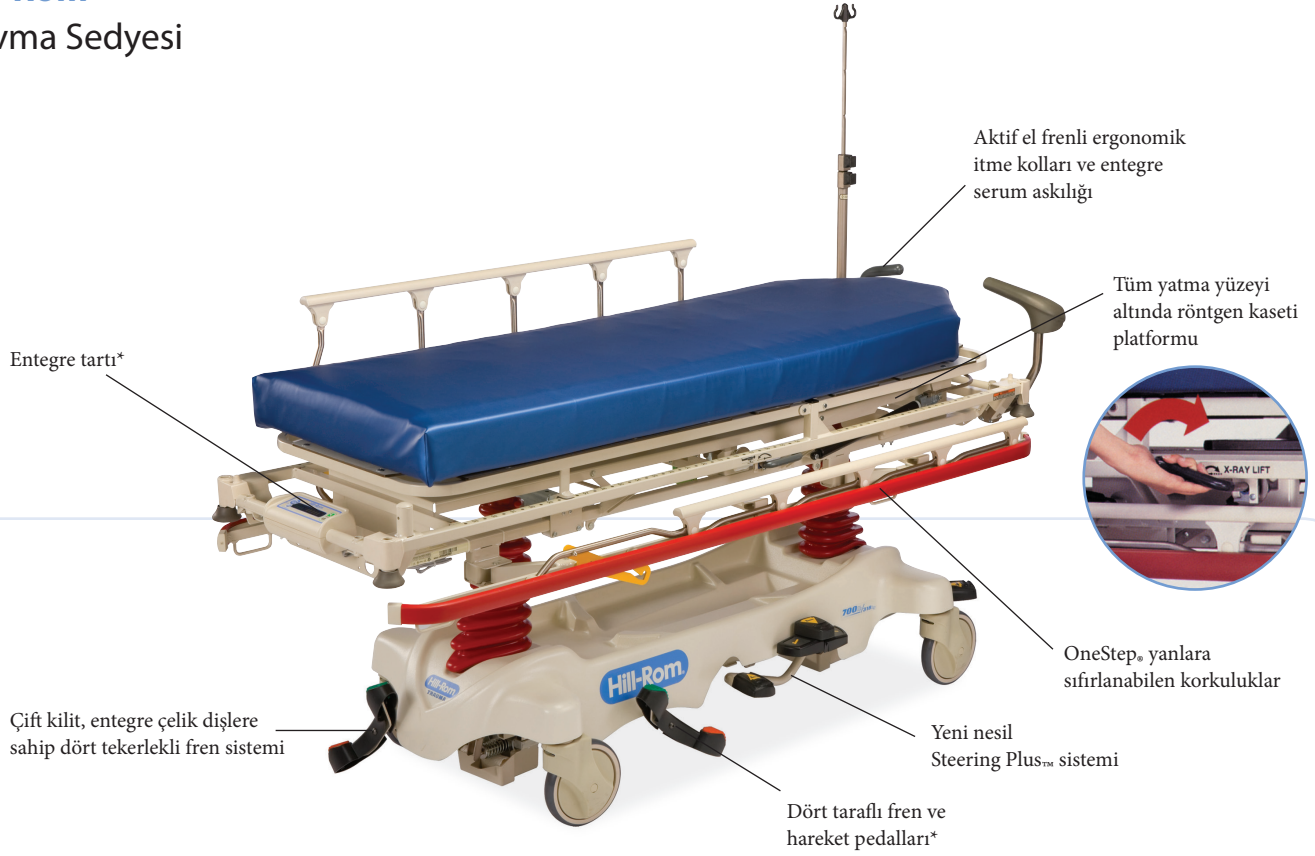

## Hill-Rom® Travma Sedyesi

Hill-Rom travma sedyesi (P8040) hem travma hem acil ünitelerinde kullanım için idealdir. Yıllar boyu kullanılmak üzere hazırlanan bu sedye, üstün hareket kapasitesi, rahatlık ve kalite sunar.

**Mobilite.** Neden sedyeyi yönlendirmek ve durdurmak için çaba sarf edersiniz? Opsiyonel el freni rampadan aşağıya doğru giderken ve ani durmalarda oluşabilecek ekstra güç kullanımını azaltır. Entegre serum askısı taşıma aparatı sedyenin ve serum askılığının kolayca manevra yaptırılmasına yardımcı olur. Yeni nesil Steering Plus™ sistemi köşelerden rahat dönmeyi ve manevra kontrolünü mümkün kılar.

**Kullanım Kolaylığı.** Bu sedye baş kısmından ayak kısmına kadar X-ray geçirgen yapısı ile zaman tasarrufu sağlar ve yaralanma riskini azaltır. Tüm platform her türlü standart röntgen kasetleri ile uyumludur. Sedyenin dört köşesinde drenaj orbaları ve göğüs drenaj tüpü için askılıklar mevcuttur.

**Kalite.** Güçlendirilmiş sedye bazalarımız uzun ömürlü kalite için sağlam, otomotiv sınıfı çelikten yapılmıştır ve daha yüksek hasta ağırlıklarını taşımak üzere 317,5 kg ağırlık kapasitesine sahiptir. Nikel kaplı itme sapları, serum askılıkları, yan korkuluklar ve diğer parçalar zorlu ortamlarda dahi paslanmaya karşı üstün dayanıklılık gösterir.

### Bir bakışta

Hill-Rom travma sedyesi temel özellikleri:


- **317,5 kg taşıma kapasitesi**
- **Entegre tartı** kilogram olarak gösterir
- **Tüm taşıma platformu** her türlü standart büyüklükte röntgen kasetleri ile uyumludur.
- **Dik pozisyonda göğüs röntgen kaseti tutucu**
- **Aktif El freni** – dünyanın ilk sedye el freni, vücut ağırlığınızı kullanmadan, sedyenin rampalarda ve köşelerde güvenli ve kolay durdurulmasına yardım eder.
- **Entegre serum askısı taşıma aparatı** sedyenin ve serum askılığının kolayca manevra yaptırılmasına yardımcı olur.
- Rahat dönüş ve manevra kontrolü için **yeni nesil Steering Plus™ sistemi**
- Güçlü ve stabil bir platform için **yedek kilitleme ve dört tekerlek freni**
- **Tazyikli su ile yıkanabilir**
- **Üç yıllık parça garantisi** ve ömür boyu çerçeve garantisi

\* İsteğe bağlı özellikler

Hill-Rom

Enhancing Outcomes for Patients and Their Caregivers.™

Özellikler	Standart Özellikler	İsteğe Bağlı Özellikler
317,5 kg taşıma kapasitesi	•	
Entegre tartı		•
Aktif El freni		•
Entegre serum askılığı taşıma aparatı		•
Fren/Yönlendirme pedalları – baş ve ayak	•	
Fren/Yönlendirme pedalları – dört tarafta		•
Yeni nesil Steering Plus™ sistemi	•	
X-ray uyumlu tüm taşıma platformu	•	
Ergonomik itme kolları		•
Kalıcı serum askılığı – 3 aşamalı		•
26 inç genişlik	•	
Ayak kısmında yüksek/alçak hidrolik pedallar		•
Yan korkuluk sistemi	Yanlara saklanabilir	
X-ray geçirgen kısım	•	
Yangın bariyerli 7,6 cm yüksek yoğunluklu köpük şilte	•	
Yangın bariyerli 10 cm yüksek yoğunluklu köpük şilte		•
12,5 cm Comfortline® çoklu yoğunluklu yangın bariyerli köpük şilte		•
Tampon renkleri – nötr, mavi, kırmızı, deniz mavisi veya mor arasından seçim	Seçenek	

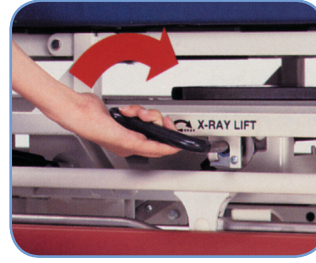

X-ray uyumlu tüm taşıma platformu



Entegre Tartı



Entegre Serum Askılığı Taşıma Cihazı



Aktif El Freni

## Teknik Spesifikasyonlar

Maksimum ağırlık.....	317,5 kg (700 lbs)
Alçak pozisyon – yerden şilte üzerine kadar olan mesafe .....	61,6 cm (24,5 inç)
Yüksek pozisyon – yerden şilte üzerine kadar olan mesafe .....	95,9 cm (37,8 inç)
Uzunluk.....	210,8 cm (83 inç)
Genişlik (yan korkuluklar yukarı konumda).....	81,3 cm (32 inç)
Genişlik (yan korkuluklar aşağı konumda).....	67,3 cm (26,5 inç)
Yan korkuluk uzunluğu.....	119,4 cm (47 inç)
Şilte/yüzey üzerinde yan korkuluk yüksekliği.....	36,8 cm (14 inç)
Şilte boyutu.....	66 cm (26 inç) x 190,5 cm (75 inç)
Maksimum baş açısı .....	90°
Maksimum Trend/Revers Trend .....	18°
Yerle taban arasındaki mesafe.....	8,9 cm (3,5 inç)
Tekerlek büyüklüğü.....	20,3 cm (8 inç)

## Aksesuarlar

- Sedyeye yastığı
- Serum taşıyıcı
- Hasta tepsi
- Malzeme tepsi
- Oksijen tüpü tutucu
- Sıvı oksijen tüpü tutucu
- İnfüzyon destek sistemi
- Yan korkuluk örtüleri
- Kolçak
- Çıkarılabilir ayakucu paneli
- Yatık röntgen kaseti tutucu
- Dosya tutucu
- Dönüştürülebilir ayakucu paneli
- Serum askısı
- Ayak bileklikleri
- Taşıma kayışları
- Ayak uzatma parçası
- Havlu kağıt kutusu



Enhancing Outcomes for Patients and Their Caregivers.™

France ..... +33 (0)2 97 50 92 12  
 United Kingdom ..... +44 (0)1530 411000  
 Deutschland ..... 0800 8 63 55 37  
 Nederland ..... +31 (0)347 32 35 32  
 Italia ..... + 39 (0)2 950541  
 Suisse/Schweiz ..... +41 (0)21 706 21 30  
 (deutschsprachig) ..... 0800 8 63 55 37

Österreich ..... 0800 8 63 55 37  
 Ireland ..... +353 (0)1 413 6005  
 Iberia ..... +34 (0)93 6856000  
 Nordic Countries ..... +46 (0)20 78 10 30  
 Export ..... Contact your local Hill-Rom distributor or contact your Area Manager via website or call ..... +1 812 934 8173

[www.hill-rom.com](http://www.hill-rom.com)

Hill-Rom®, tasarım, özellik ve modellerde önceden bildirilmeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Hill-Rom. tarafından sadece satın alınan veya kiralanmış ürünleri kapsayan, açık bir yazılı garanti verilmektedir. © 2013 Hill-Rom® SARL, HER HAKKI SAKLIDIR.