

Hasta bakımında kullanım kolaylığı
ve etkinlik: daha iyi sonuçlar.



Hill-Rom®

Enhancing Outcomes for Patients and Their Caregivers.™

Hasta bakımına odaklanmanızı saęlayan olaęanüstü etkin bir yatak.

80 yıldan fazla bir süreye dayanan hastane yatakları tasarım deneyimimiz, hasta bakım kalitesinin onların tedavisine ayırdığınız zamana baęlı olduğunu göstermektedir. Hill-Rom® 900 yataęı kullanım kolaylıęı ile maksimum işlevsellik sunar. Böylece, yataęı kullanmaya daha az zaman ve enerji ayırır hastalarınızı mobilize etmek ve güvenliklerini saęlamak gibi elzem işlere daha fazla odaklanabilirsiniz.



Kolay kullanılan kontrol paneli sayesinde zaman tasarrufu saęlanır.



Dar alanlarda sıkışıklıęı engeller ve zamandan tasarruf saęlar
yani benzer hastane yataklarının kapladığı alanının sadece 1/3'ünü kaplayan korkuluklar sayesinde sıkışık yerlerde karmaşıya yaşanmasını engeller¹.



Merkezi 5. tekerlekle yatak transferi sırasında daha az çaba harcanır.

- Yataęın saę ve sol dönüşleri esnasında daha az çaba harcanır.
- Hareket esnasında devreye girerek zaman tasarrufu saęlar.

A photograph of a man with grey hair lying in a white hospital bed. A caregiver's arm is visible, operating a control panel on the side of the bed. The bed has blue and white striped pillows and a white blanket. A window is visible in the background. The control panel features several buttons with icons for different bed positions and a small diagram of a person in a bed. The Hill-Rom logo is visible on the bed frame.

Ankete katılan hasta bakıcıların %90'ından fazlası Hill-Rom® 900 yatağının kullanılmasının kolay olduğunu söylemiştir.²

Ortalama
harcadığınız
günlük çabayı
200 kg azaltır.³

**Her gün birçok kere
zaman ve çaba tasarrufu
sağlar.** Hastalar rahatsız
edilmeden, tek el ve hareketle
yan korkuluklar serbest
bırakılarak indirilir.

Mobilizasyonu destekleyen özellikleri sayesinde hasta otonomisini ve hasta rehabilitasyonunu kolaylaştırır.

Erken ve sık hasta mobilizasyonu hastanın iyileşmesini destekler⁴. Ancak, genellikle hem hemşireler hem hastalar için riskli ve karmaşıktır⁵. Hill-Rom® 900 yatağındaki benzersiz işlevler, hastanızı yatak içinde döndürme, "sandalyeye kaldırma" ve koltuk pozisyonunda oturtup yataktan kaldırmaya kadar olan tüm mobilizasyon adımlarında kolay, güvenli ve emin bir şekilde ilerlemenizi mümkün kılar.

Yatakta tekrar pozisyonlandırma ve yana çevirme gibi mobilizasyon adımlarında hastanın katılımını destekler.



Hastalar tek tuş EasyChair® (koltuk pozisyonu) özelliği ile erken, güvenli ve kolay bir şekilde mobilize edilir.



Hastanın yatağın bir tarafında oturtulması için gerekli zaman ve çabayı ortadan kaldırır. Tek tuşla çıkma pozisyonu ve optimum yan korkuluk tasarımı hastanın uygun şekilde pozisyonlandırılmasını mümkün kılar.





Daha Güvenli Mobilizasyon


Entegre Care Grip (tutma kolları) yan korkuluklar hastaların ayağa kalmasına yardımcı olur veya onları bir sandalyeye aktarırken hastalara sağlam ve stabil destek sunar. Bunun sonucunda hastaların düşme riski azalır, hasta bakıcılar daha az yorulur ve her ikisi daha fazla güven duyar.

Bir bakışta
en güvenli
pozisyonda
olduğu anlaşılır.



Yatak alçak pozisyonda

Tek bir tuşla yatağı herhangi bir açılı pozisyondan, yerden 39 cm'den daha az mesafeye kadar düz pozisyona getirmek için "düz pozisyon" işlevi kullanılabilir.

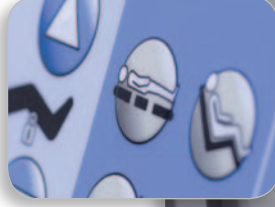

Akıllı gece ışığı

Hastanın odasının dışından bile bir bakışta yatağın uyku için en güvenli konumda olduğundan emin olabilirsiniz.

Yatak en düşük konumunda olduğunda gece ışığı yeşil yanar. Ayrıca, düşme riskini azaltmak için hastanın yataktan kalktığı zemin alanını aydınlatır.

Yatak en düşük pozisyonda değilse, gece ışığı turuncu yanar. Kontrol panelindeki uyarı ışığı da hasta bakıcıyı uyarır.

Fren devrede.

Fren devrede göstergesi eğer frenler uygun şekilde devrede değilse sizi uyarır.



Güvenli korkuluklar

Yan korkuluklar hastanın yataktan kendi başına çıkışına olanak sağlar. Hill-Rom® 900 yatağı EN 60601-2-52 (hastane yatağı standardıyla) sertifikasına uyumlu olup yatak boyu uzatıldığında bile hastanın sıkışma riski minimumdur.





Hastalarınız kaliteli bakım için size güvenir.
Siz de kaliteli ürünler için Hill-Rom'a güvenebilirsiniz.
Hill-Rom'un sertifikalı test laboratuvarında mevzuata uygun
test edilen Hill-Rom® 900 yatağı uzun ömürlü olacak şekilde
üretmiştir.

Yatağa toplam olarak, EN 60601-2-52 (2010) standardının
gerektirdiğinin 6 katından fazla olan 14M kg^e uygulanmıştır.
Bu yatağın kullanım süresi boyunca güvenilir şekilde
performans göstereceğinden emin olabilirsiniz. Uygun
bakım yapıldığı takdirde hastalarınız ve hasta bakıcılarınız
için güvenle kullanmanızı sağlar.

1. Karşılaştırma, üst pozisyon ve ara pozisyonda korkulukların dış kenarından
çerçeveye kadar mesafenin ölçülmesiyle iki farklı üreticinin yatağında yapılmıştır
2. DJS Research, HR900 customer satisfaction survey, November 2011.
3. Korkulukları alçaltmak için basit bir dokunuşla bırakmanız yeterlidir. Manuel
olarak alçaltmanız gerekmez. Bir hasta bakıcının günde kaç defa korkulukları
indirdiğine bakıldığında her gün 200 kg üzerinde bir çaba harcadığı görülmektedir.
4. Markey, DW, Brown RJ, An interdisciplinary approach to addressing patient activity
and mobility in the medical-surgical patient., Journal of Nursing Care Quality, 2002
Jul;16(4):1-12.
5. Flanders SA, Harrington L, Fowler RJ. Falls and Patient Mobility in Critical Care:
Keeping patients and staff safe. AACN Adv Crit Care. 2009; 20(3): 267-276.
6. Kümülatif yük, kg yük ile her test protokolünde tanımlanan döngü sayısının
çarpımıdır.

Hill-Rom® standartlarına göre test edilmiştir



Hill-Rom ve Tasarım ve Hill-Rom, Hill-Rom Services Inc.'in ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.
EasyChair Hill-Rom Services, Inc.'in bir ticari markasıdır.



Hill-Rom.

Enhancing Outcomes for Patients and Their Caregivers.™

Türkiye Yetkili Distribütörü:

Universal Medikal Araçlar San. ve Tic. Ltd. Şti.

Universal Plaza, Fatih Sultan Mehmet Caddesi
No: 36 Kat: 5 Kavacık, 34810 İstanbul

Tel: (216) 425 10 45
Fax: (216) 425 20 30
info@universalmedikal.com.tr
www.universalmedikal.com.tr

www.hill-rom.com

Hill-Rom® haber vermeden tasarım, spesifikasyonlar
ve modellerde değişiklikler yapma hakkını saklı tutar.
Hill-Rom®'un verdiği tek garanti ürünlerinin satışı veya
kiralama durumunda verilen açık yazılı garantidir.
© 2012 Hill-Rom® SARL, TÜM HAKLARI SAKLIDIR