

P280

Hastalarınızı basınç ülserinden korumak için güvenli bir ortam sağlar



Özellikleri ve yararları


- Özellikle basınç ülserleri bulunan veya risk altında olan hastalarda **gelişmiş önleme** ve tedavi için tasarlanmıştır
- Hasta ihtiyaçları ve klinik tercihe uygun olarak **alterne veya sürekli düşük basınç tedavileri arasında seçim imkanı**
- Hasta tedavisi ve konforuna ilişkin daha fazla kontrol için **ayarlanabilir döngü süreleri ve sertlik ayarı**
- Otomatik kontrol paneli kilitleme, arıza göstergeleri ve 10 saatlik taşıma modu dahil **hasta ve sağlık çalışanı güvenlik özellikleri**
- **Üç adet basınç yeniden dağıtma bölgesi**, 5° eğimli topuk bölgesi dahil hassas vücut alanları için ilave koruma sağlar
- Şilte değiştirmeden yaygı sistemine **kolay dönüşüm**
- Hasta pozisyonlandırma ve transfer aktiviteleri sırasında ilave destek ve güvenlik için **P-MAX ve PLUS şişirme seçenekleri**

P280

Yaygı terapi sistemi

Hill-Rom'un P280 yaygı sistemi, Alterne ve Sürekli Düşük Basınç tedavisi modlarında ayarlanabilir bir batma ve zarflama düzeyi sağlayarak, düşük ila orta düzeyde riskli yetişkin hastalarda basınç ülserlerinin önlenmesine ve tedavi edilmesine yardımcı olur.

Bu terapötik yaklaşım hassas dokularda kompresyonu azaltır ve klinisyenlere "basınç ülseri gelişme riski daha yüksek olan hastalarda sık sık manuel yeniden pozisyonlandırmanın mümkün olmadığı durumlarda hastalar için bir aktif destek yüzeyi kullanılması" önerisinin sunulduğu NPUAP/EPUAP/PPPIA Uluslararası Kılavuzuna uygundur¹

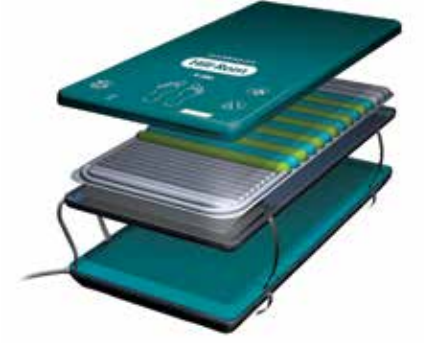

Teknik Spesifikasyonlar

Yaygı

Uzunluk	200 cm
Genişlik	90 cm
Yükseklik	10 cm
Ağırlık	7,5 kg

Replasman Şilte Sistemi

Uzunluk	200 cm
Genişlik	90 cm
Yükseklik	17 cm
Ağırlık	14 kg

Kontrol Ünitesi

Uzunluk	29 cm
Genişlik	20 cm
Yükseklik	12 cm
Ağırlık	2,2 kg

Güvenli Çalışma Yüğü

(Maksimum Hasta Ağırlığı)

250 kg

Kılıf materyali

Polyester materyal üzerinde poliüretan kaplama, 360° fermuarlı, kaynaklı dikişler, düşük sürtünme, iki yönlü esneme, nem buharı geçirebilir, bakteriyostatik, fungistatik ve antimikrobiyal. Silerek temizlenebilir ve yıkanabilir. Klorür bazlı temizleme solüsyonları kullanılabilir (≤ 1000 ppm).

¹ EPUAP/NPUAP/PPPIA Basınç Ülserleri Önleme ve Tedavisi için Uluslararası Kılavuzları, 2014

Hill-Rom 100'ün üzerinde ülkede 7000'den fazla çalışanıyla önde gelen küresel bir tıbbi teknoloji şirkettir. Beş ana alanda klinik ve ekonomik sonuçları iyileştiren hasta bakımı çözümlerine odaklanarak sağlık çalışanlarıyla işbirliği içerisinde çalışıyoruz:

Mobilitiyi Artırmak, Yara Bakımı ve Önleme, Klinik İş Akışı, Cerrahi Güvenlilik ve Etkililik ve Solunum Sağlığı. Hill-Rom bünyesindeki kişiler, programlar ve ürün markaları bir tek göreve odaklanmaktadır: **Her gün, dünyanın her köşesindeki hastalarımızı ve bakıcıları için sonuçları iyileştiriyoruz.**

Tüm ürünler/seçenekler tüm ülkelerde mevcut değildir. Bu ürün veya bir hizmet konusunda daha fazla bilgi için lütfen yerel Hill-Rom temsilciniz ile iletişim kurun veya internet sayfamızı ziyaret edin:

www.hill-rom.com

Bu belge yalnızca sağlık uzmanlarının kullanımına yöneliktir. Bu broşürde gösterilen tıbbi cihazlar, sağlık kuruluşlarının bölümlerindeki hastalarda kullanım amaçlıdır.

CE Bu tıbbi cihazlar CE işaretine sahiptir ve tüm geçerli yönetmeliklere uygundur. Hill-Rom, tıbbi cihazlarla birlikte verilen belgelerde yer alan, güvenli ve doğru kullanıma ilişkin ayrıntılı talimatları dikkatlice okumanızı tavsiye eder. Sağlık kuruluşlarının personelleri, bu tıbbi cihazların doğru kullanımı ve bakımından sorumludur.

Medikal Yataklar/Şilteler Üreticisi:

Hill-Rom Industries SA, 188 Rue du Caducée, Parc EuroMédicine, 34195 Montpellier Cedex 5, France
Hill-Rom SAS, B.P. 14 - Z.I du Talhouët, 56330 Pluvigner, Fransa (ayrıca Avrupa Temsilcisi)
Völker GmbH, Wullener Feld 79, 58454 Witten, Almanya
Hill-Rom Holdings, Inc., 1069 State Route 46 East, Batesville, IN 47006, ABD
Lift üreticisi: Liko AB, Nedre vägen 100, 975 92 Luleå, İsveç

Hill-Rom tasarım, teknik özellik ve modellerde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Hill-Rom'un verdiği tek garanti ürünlerinin satış veya kiralınmasını kapsayan açık, yazılı garantidir.

©2015 Hill-Rom Services, Inc. TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bel. No: 5TR119302-01, 26 Mart 2015

Enhancing outcomes for
patients and their caregivers:

Hill-Rom