


Hill-Rom NP100 Bidensity

Basınç ülseri oluşumunu etkin ve güvenli bir şekilde önler

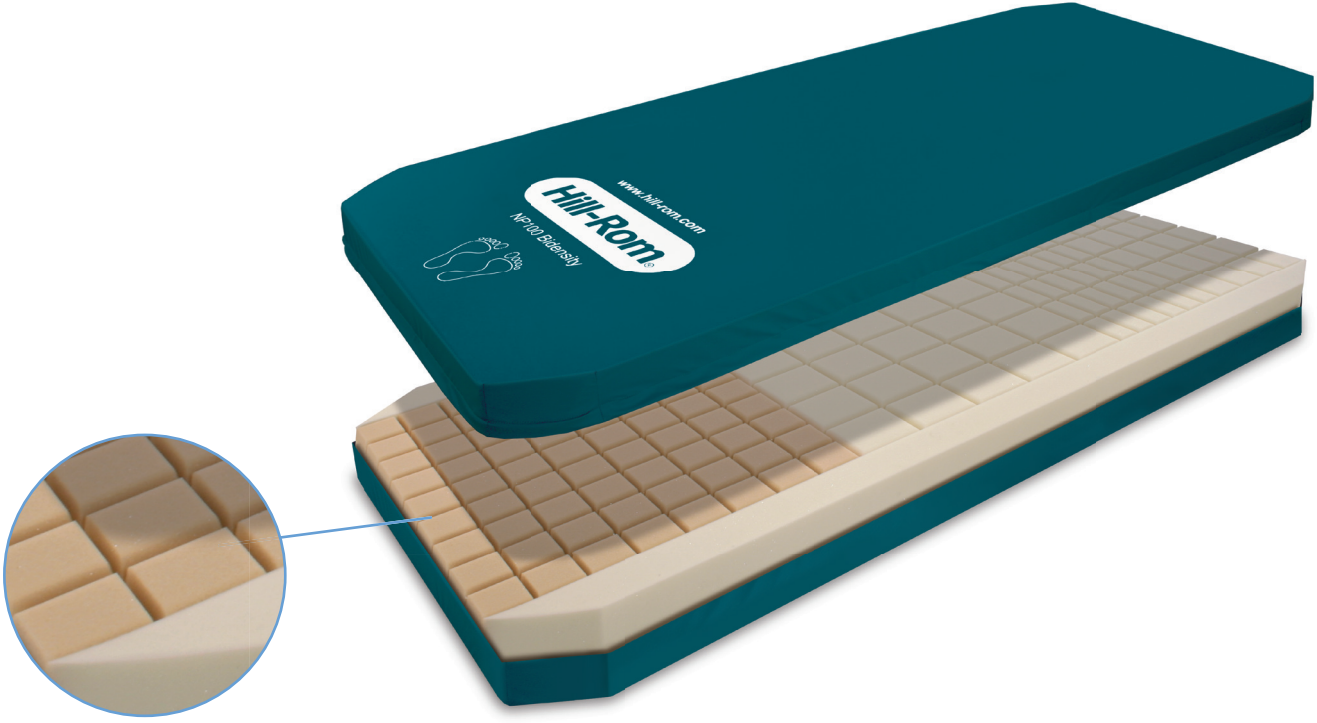

Özellikleri ve avantajları

- Küp kesim tasarımı, vücut şekline bağımsız olarak uyum sağlarken arayüz basıncını ve sürtünmeyi azaltır
- Bağımsız küpler, hava sirkülasyonunu artırırken nem birikimini azaltarak maserasyonun ve makaslama kuvvetinin düşmesini sağlar
- Düşük yoğunluktaki topuk bölgesi, topuklar ve ayak bilekleri için nazik bir destek oluşturur
- Temizlenmesi kolay ve hijyeniktir
- Yüksek yoğunluklu yan kenarlar hasta güvenliğini sağlamak ve yataktan çıkmayı kolaylaştırmak için tasarlanmıştır
- Farklı modellerdeki çoğu yatağa uyar ve tüm yatak konumlarına uyum sağlar
- Gömme taşıma saplı kılıf kaynak dikişlidir

Enhancing outcomes for
patients and their caregivers:

Hill-Rom

Hill-Rom NP100 Bidensity

Yüksek esnekliğe sahip, iki kat yoğunlukta sünger şilte

Bağımsızlık, iki kat yoğunluk ve küp kesim sünger gibi özellikleriyle Hill-Rom NP100 Bidensity şilte, hastanın şekline uyum sağlayarak arayüz basıncını ve sürtünmeyi azaltır. Küp kesim sünger, yüzeyin altındaki hava sirkülasyonunu artırırken nem birikimini azaltarak maserasyonun ve makaslama kuvvetinin düşmesini sağlar.

Hill-Rom NP100 Bidensity şilte, cilt bütünlüğünün bozulmasını ve basınç ülserlerinin oluşmasını önlemeye yardımcı olacak düşük maliyetli bir çözümdür. Düşük yoğunlukta topuk bölgesi sayesinde, topuklar ve ayak bilekleri için nazik bir destek oluşturur. Farklı modellerdeki çoğu yatağa uyar ve tüm yatak konumlarına uyum sağlar.

Tamamen kapalı şiltenin su geçirmeyen ancak buhar geçiren, her yöne esneyebilen, bakteriyostatik ve fungistatik poliüretan kılıfı kolayca temizlenir ve dezenfekte edilir. Böylece hastalar ve bakıcılar için daha fazla hijyen sağlanır.



Hill-Rom NP100 Bidensity için uzatılabilir 1 ürün çeşidi daha mevcuttur

Standart boyut: 198 cm

+5 cm

Teknik Özellikler

Şilte (kişiye özel boyutlar mevcuttur)

Uzunluk	198 veya 203 cm
Genişlik	85 veya 90 cm
Yükseklik	14 cm

Garanti

Hill-Rom, sünger için 5 yıl ve kılıf için 2 yıl garanti sunmaktadır. Sunulan garantinin detayları için lütfen yerel Hill-Rom temsilcinizle iletişime geçin.

Güvenli Çalışma Yüğü

250 kg

Önerilen terapötik ağırlık

30 ila 150 kg

Dikip Tipi

kaynak dikişli/dikili

Dezenfeksiyon

Klor bazlı solüsyonlar kullanılabilir. Konsantrasyon en fazla 1000 ppm olmalıdır (veya XT sürümü için en fazla 10.000 ppm olmalıdır).

Hill-Rom dünya genelinde 10.000'den fazla çalışanıyla önde gelen bir global tıbbi teknoloji şirkettir. **Mobilitiyi Artırma, Yara Bakımı ve Önleme, Hasta İzleme ve Tanı, Cerrahi Güvenlik ve Etkililik, Solunum Sağlığı** olmak üzere beş ana alanda klinik ve ekonomik kazanımları iyileştiren hasta bakımı çözümlerine odaklanarak 100'den fazla ülkede ve tüm bakım ortamları genelinde sağlık çalışanlarıyla işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Hill-Rom çalışanları, ürünleri ve programları tek bir misyona ulaşmak için çalışır: **Dünyanın her köşesindeki hastalarımız ve bakıcıları için sonuçları her geçen gün iyileştirmek.**

Tüm ürünler/seçenekler her ülkede mevcut değildir. Ürün ve hizmetlerimizle ilgili daha fazla bilgi için lütfen yerel Hill-Rom temsilcinizle iletişime geçin veya web sayfamızı ziyaret edin:

www.hill-rom.com

Hill-Rom NP 100 yüzeyi; çeşitli sağlık bakımı ortamlarında risk taşımayan veya orta düzeyde risk taşıyan, 30 kg ila 150 kg ağırlığında ve en az 1,46 m boyundaki hastalarda basınç ülserlerinin oluşmasını önlemeye yardımcı olur.

Sınıf I

Üretici: Hill-Rom S.A.S. – BP 14 ZI du Talhouët 56330 Pluvigner Fransa

Bu tıbbi cihaz, söz konusu yönetmelik uyarınca CE işareti taşıyan, yasal düzenlemelere tabi bir sağlık ürünüdür. Hill-Rom, tıbbi cihazlarla birlikte verilen belgelerde yer alan, güvenli ve doğru kullanıma ilişkin ayrıntılı talimatları dikkatlice okumanızı tavsiye eder. Sağlık kuruluşları personeli, bu tıbbi cihazların doğru kullanımından ve bakımından sorumludur. Hill-Rom; önceden bildirimde bulunmaksızın tasarım, teknik özellikler ve modeller üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Hill-Rom'un verdiği tek garanti, ürünlerinin satış veya kiralanmasını kapsayan açık, yazılı garantidir.

©2017 Hill-Rom Services, Inc. TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bel. No: STR116304-03, 26 Eylül 2017

Enhancing outcomes for patients and their caregivers:

Hill-Rom